

Technologie FLOQSwab®

L'écouvillon qui a réinventé la collecte de l'échantillon !

- Surface floquée et composé adhésif breveté
- Absorption optimale
- Conçu pour plusieurs sites de collecte




Qu'est-ce que FLOQSwab® Copan ?


FLOQSwab® a été conçue pour répondre au besoin des professionnels de la santé pour une collecte d'échantillon plus efficace.

La principale caractéristique de cette technologie brevetée est la disposition perpendiculaire des fibres courtes de Nylon®. Cette invention révolutionne le monde pré-analytique, amenant l'échantillonnage à un niveau supérieur, garantissant une absorption rapide de l'échantillon et une élution supérieure. Elle élargit donc les possibilités de tests de diagnostic en aval.

La tige sur laquelle repose cette nouvelle pointe, est composée d'un plastique assurant une résistance et une flexibilité maximale. Celle-ci peut aussi être munie d'un point de rupture pour sécuriser la libération de l'échantillon dans un tube.

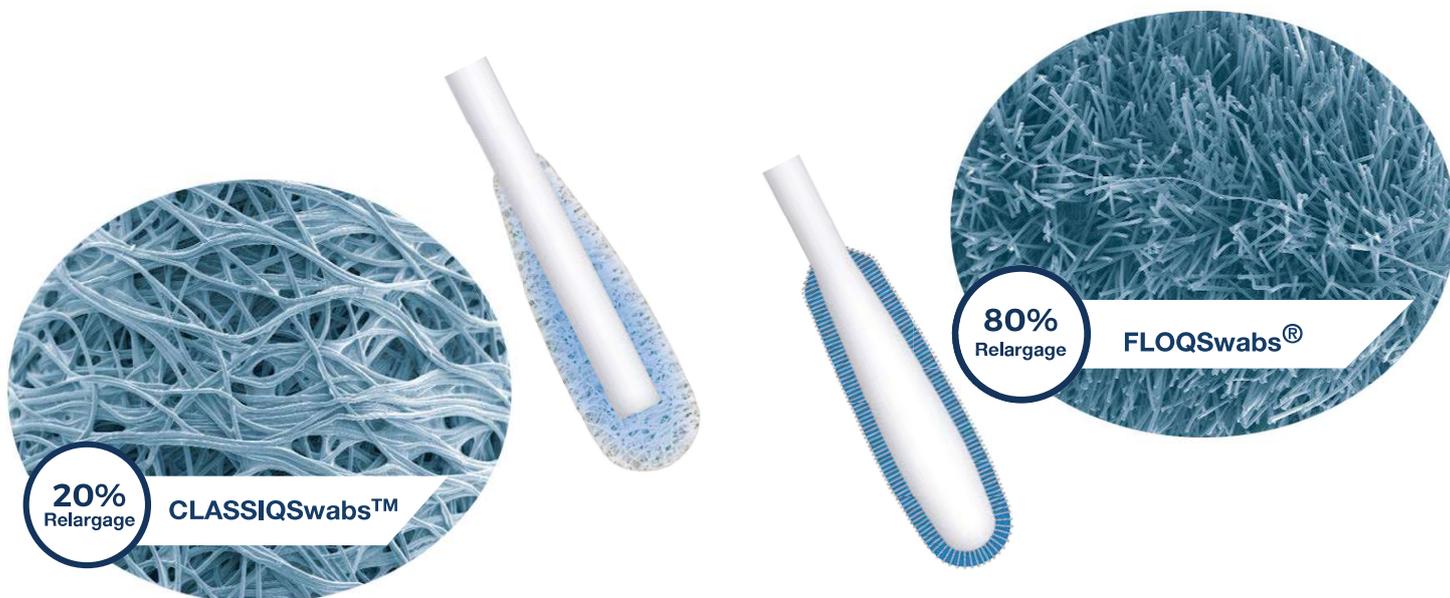

Les FLOQSwabs® sont constituées d'un manche applicateur en plastique moulé solide avec un embout, qui peuvent tous deux varier en taille et en forme.

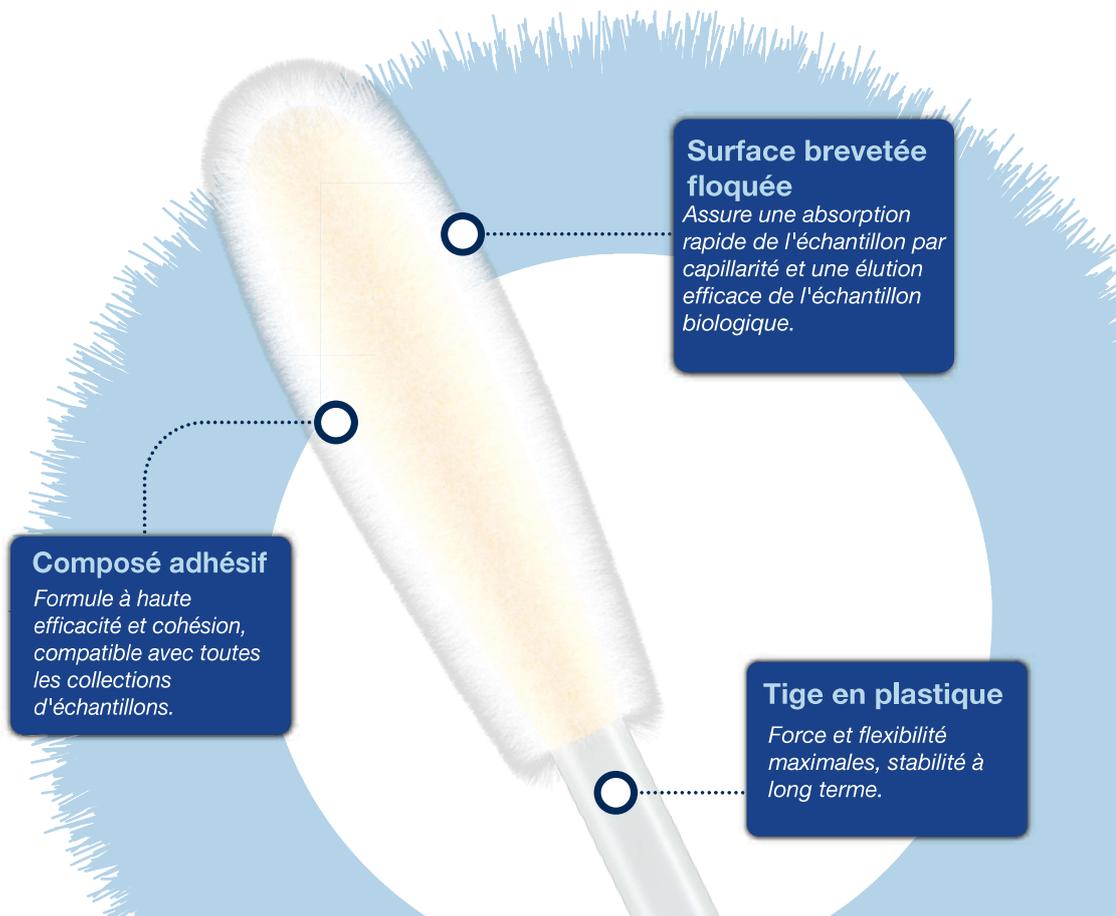

L'accord parfait

La combinaison de FLOQSwabs® avec différents milieux de transport de bactériologie et de virologie étend davantage leur domaine d'application.



UTM®
*Milieux de collecte, transport
et stockage des virus*



eSwab®
*Milieux de collecte et de transport
traditionnels pour la culture*



eNAT®
*Inactive la viabilité microbienne en
préservant les acides nucléiques
pour les tests moléculaires*



Mswab®
*Milieux de collecte et de conservation
optimisés pour les applications
moléculaires*



SRK®
*Système simple et rapide de contrôle
qualité microbiologique des surfaces*

FLOQSwabs STERILE

Désignation	Distance point de rupture	Produit	Produit avec tube
Regular 	100 mm	519CS01	519C/10
	80 mm	502CS01	552C
	30 mm	520CS01	552C
Mini Tip 	100 mm	518CS01	518C
	80 mm	501CS01	551C
Ultra Thin Minitip 	80mm	525CS01	560C
Flexible Mini Tip 	100mm	503CS01	553C
Ultra Mini Tip 	100mm	516CS01	516C
Cone Shape 	80mm	511CS01*	N/A
Large Contoured with Stopper 	<i>non cassable</i>	528CS01	528C
Contoured Adult 	80mm	56380CS01	N/A
Contoured Pediatric 	80mm	56780CS01	N/A
	50mm	56750CS01	N/A

Conditionnement : 1000 pièces (10 boîtes de 100 pièces) par boîte, sauf indication contraire.

*Emballage : 500 pièces (10 boîtes de 50 pièces) par boîte



IVD solutions through partnership

Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road, Bootle, Merseyside L20 1EA
Tel: + 44 (0) 151 933 7277 e-mail: sales@mast-group.com

Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20, DE-23858 Reinfeld
Tel: + 49 (0) 4533 2007 0 Fax: + 49 (0) 4533 2007 68 e-mail: mast@mast-diagnostica.de

Mast Diagnostic
12 Rue Jean-Jacques Mention, CS 91106, 80011 Amiens CEDEX 1
Tél. + 33 (0) 322 80 80 67 Fax + 33 (0) 322 80 99 22 e-mail: info@mast-diagnostic.fr