



CRYOBANK[®]

Das Stammhaltungssystem für
Mikroorganismen


Lückenlose
Rückver-
folgung

- Zuverlässig und bewährt
- Schnell und anwenderfreundlich
- Barcodierte Röhrchen und Aufbewahrungsboxen
- Wirtschaftlich und effizient

Die **CRYOBANK®** basiert auf einem Cryoröhrchen-System, das chemisch behandelte Kügelchen (Beads) enthält. Die Cryobank beinhaltet neben den Beads eine spezielle cryogene Konservierungslösung. So bietet die **CRYOBANK®** ein zuverlässiges, komfortables und vielseitiges System zur Langzeitkonservierung anspruchsvoller Bakterien und Pilze. Die **CRYOBANK®** ermöglicht eine einfache Etablierung einer Stammsammlung (z.B. für Qualitätskontrollstämmen) sowie ihre sichere Aufbewahrung. Die **CRYOBANK®** kann Routine- und Forschungsarbeiten in der Klinik, der Lebensmittel-, Wasser- und Pharmaindustrie unterstützen.

Funktionen und Vorteile:

- Barcodierte Röhrchen und Aufbewahrungsboxen für eine lückenlose Rückverfolgung; geeignet für alle gängigen Barcode-Lesegeräte
- Einfache Handhabung
- Bewährte Langzeitkonservierung von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen
- Unkomplizierte und schnelle Verfügbarkeit der Proben durch trockenes Einfrieren ohne Medium
- Langzeitlagerung durch Tiefgefrieren bei -20 °C bis -80 °C: Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit sowie hohen Rekultivierungsraten der Mikroorganismen
- Lieferung mit Entnahme-Tool zur einfachen Entnahme von Cryoröhrchen
- Farbcodierte Beads und Deckel für einfache Zuordnung

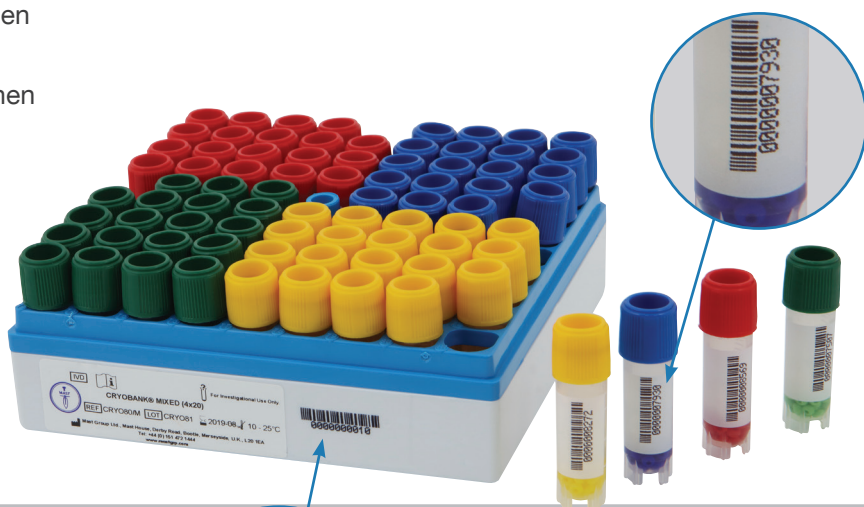

Bestellinformation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
291800	Cryobank® Starter-Set	1 Cryobank gemischt, 1 Cryoblock
291801	Cryobank® - rot	80 Röhrchen
291802	Cryobank® - grün	80 Röhrchen
291803	Cryobank® - gelb	80 Röhrchen
291804	Cryobank® - blau	80 Röhrchen
291809	Cryobank® - gemischte Farben	80 Röhrchen
29180DRY	Cryobank® - gemischte Farben trocken	80 Röhrchen
291690	Cryobank® Aufbewahrungsbox - barcodiert	1 Box für 81 Röhrchen
291610	Cryoblock	1 Block für 18 Röhrchen
291611	Ersatz-Styroporbox	1 Stück

MD V.1.1 / 2025-03-06

United Kingdom
Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: +44 (0)151 933 7277
Fax: +44 (0)151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Germany
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0
Fax: +49 (0)4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1

Tél: +33 (0)322 80 80 67
Fax: +33 (0)322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr